


Hoofdstuk 1 Dynamisch account

Als je geen vast IP-adres hebt, kun je werken met een Dynamisch account.

Je kunt toegang krijgen tot het Intramed OnLine portaal door gebruik te maken van VPN software in combinatie met Microsoft Remote Desktop. Hierdoor wordt een beveiligde verbinding opgezet tussen je computer en het hostingsnetwerk van Intramed OnLine, zodat het zeker is dat alleen jij toegang krijgt tot de omgeving.

Het in gebruik nemen van Intramed OnLine bestaat uit de volgende stappen:


- Tunnelblick installeren;
- Sophos profiel downloaden;
- Microsoft Remote Desktop installeren en Intramed opstarten;
- Mogelijke problemen.

 *Je kunt maar 1 verbinding opzetten. Als je de verbinding bijvoorbeeld thuis nog aan hebt staan, kun je op de praktijk niet nóg een verbinding maken. De verbinding op de computer thuis moet dan eerst uitgeschakeld worden.*
Verbreek daarom altijd de verbinding na gebruik!

1.1 Tunnelblick installeren

Om verbinding te kunnen maken met Intramed OnLine, is het nodig dat je de (gratis) app "Tunnelblick" installeert en configureert.


1. Ga naar de website www.tunnelblick.net

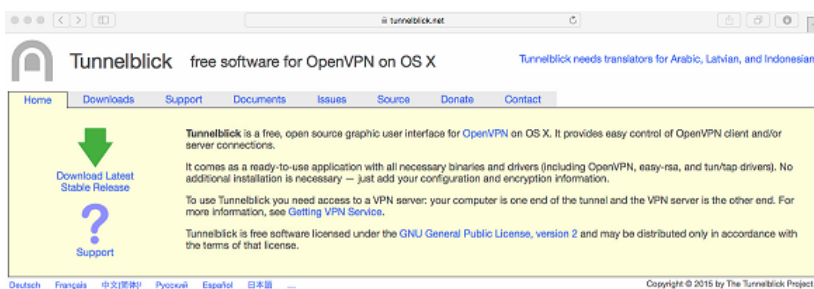


2. Klik aan de linkerkant op "Download Latest Stable Release" en download het bestand.
3. Open het zojuist gedownloade bestand.




4. Dubbelklik op "Tunnelblick".

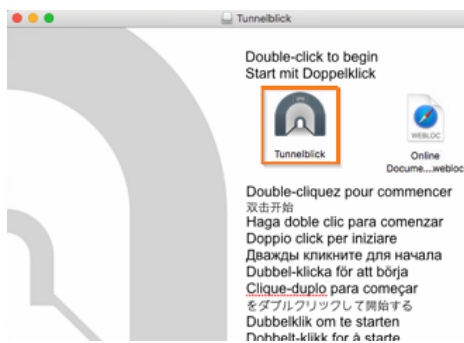


5. Klik op "Open".

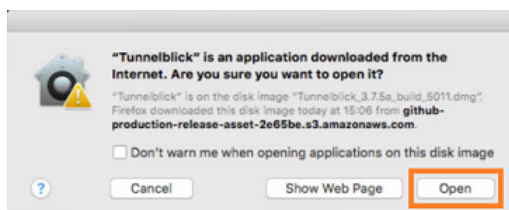

6. Klik op "I have configuration files".

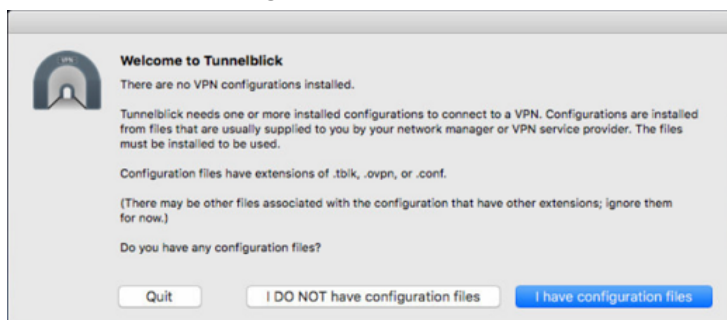

7. Klik op "OK".

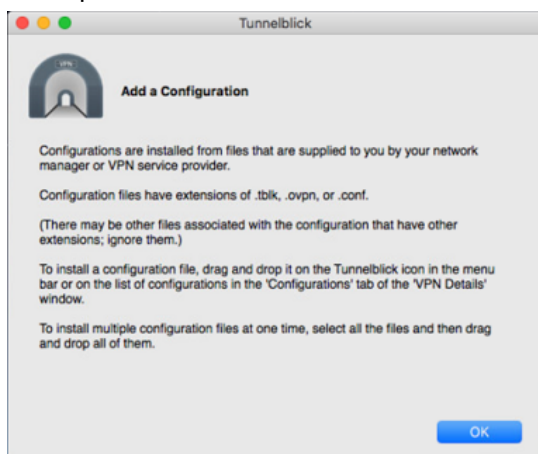


8. Als de installatie geslaagd is, krijg je rechts bovenin een melding.

1.2 Sophos profiel downloaden via VPN pagina

Vervolgens is het nodig dat je het Sophos profiel downloadt. Daardoor wordt een profiel toegevoegd in het menu van tunnelblick, waarmee je in het vervolg verbinding kunt maken met Intramed OnLine.

1. Open de browser, en ga naar <https://dynamisch.intramedonline.nl>
2. Vul de velden in:

Veld	Omschrijving
Gebruikersnaam:	Typ de VPN gegevens van Intramed OnLine in. Bijvoorbeeld <i>jjansen@intramed.nl</i> .
Wachtwoord:	Typ je wachtwoord in.

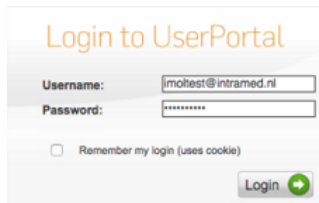

- Klik op "Login"; de welkompagina wordt geopend.



Welkom op de VPN portal voor Intramed Online


Vanaf deze portal kunt u VPN software downloaden om toegang krijgen tot de loginportal van Intramed Online.

De eerstvolgende stappen die u kunt gaan uitvoeren:

- Klik op "Externe toegang"
- Download het complete SSL VPN installatiepakket
- Installeer het SSL VPN installatiepakket
- Start de SSL VPN connectie en vul uw logingegevens in
- Ga naar de loginportal, members.intramedonline.nl.

Voor meer hulp kunt u de [handleidingen](#) raadplegen, bellen met het Servicecentrum op 0182 621 121 of een mail sturen naar meldingen@intramedonline.nl

- Klik boven op "Remote Access".
- Klik op "Downloaden" bij de optie voor MacOSX.

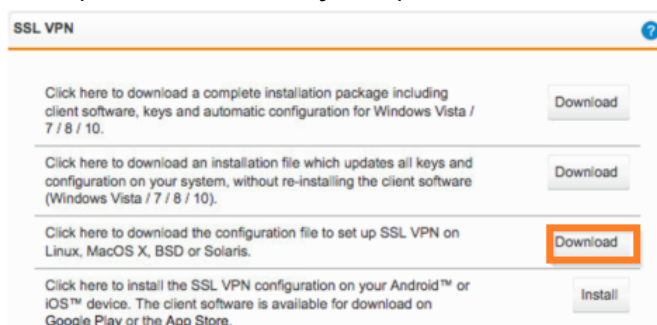

SSL VPN


Click here to download a complete installation package including client software, keys and automatic configuration for Windows Vista / 7 / 8 / 10. Download

Click here to download an installation file which updates all keys and configuration on your system, without re-installing the client software (Windows Vista / 7 / 8 / 10). Download


Click here to download the configuration file to set up SSL VPN on Linux, MacOS X, BSD or Solaris. Download


Click here to install the SSL VPN configuration on your Android™ or iOS™ device. The client software is available for download on [Google Play](#) or the [App Store](#). Install

6. Klik op "OK" om het bestand met Tunnelblick te openen.

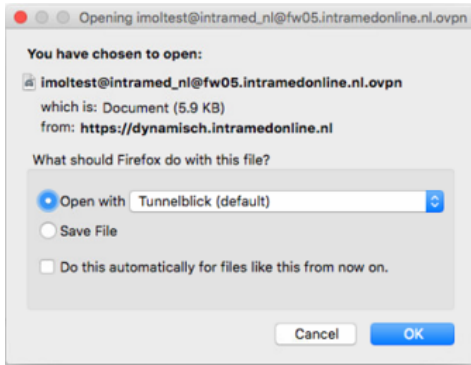


7. Klik op "All Users" als de Mac meerdere gebruikeraccounts heeft die gebruik maken van hetzelfde profiel. Klik anders op "Only Me".


 Als meerdere gebruikers op dezelfde Mac werken met **verschillende** accounts, kun je stap 1 t/m 10 herhalen om meerdere accounts toe te voegen (met verschillende inloggegevens).

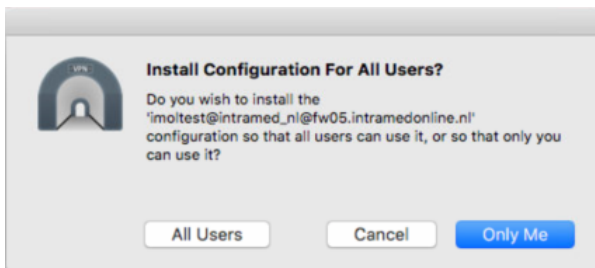


8. Er wordt een pop-up getoond met de melding dat het vpn profiel succesvol geconfigureerd is.
9. Klik op het icoon van Tunnelblick in de menubalk boven in beeld;

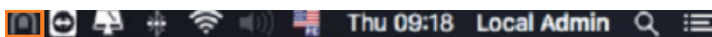


er wordt een menu geopend met de door u toegevoegde accounts.

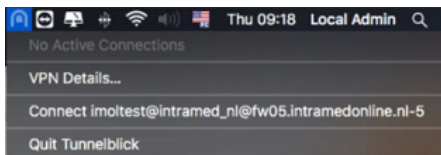


10. Klik op je account (Connect [uw gebruikersnaam]@dynamisch.intramedonline.nl).
11. Typ je gebruikersnaam en wachtwoord van Intramed OnLine in.

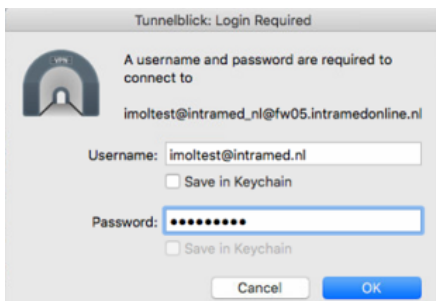

12. Klik op "OK"; het scherm "[uw gebruikersnaam]@dynamisch.intramedonline.nl" wordt geopend.
13. Klik op "Connect".


 Als de letters groen zijn, is er verbinding.
Als de letters geel zijn, wordt er verbinding gemaakt.
Als de letters rood zijn, is er geen verbinding.

 Als je met meerdere accounts de Mac gebruikt, is het nodig dat je de verschillende accounts installeert op de Mac. Herhaal in dat geval de stappen bij "Tunnelblick installeren" en "Sophos profiel downloaden via VPN pagina".

1.3 Microsoft Remote Desktop installeren en Intramed opstarten

Om verbinding te kunnen maken met Intramed OnLine, is het nodig dat je de (gratis) app "Microsoft Remote Desktop" installeert en configureert. Vervolgens kun je Intramed opstarten en gebruiken.

1. Open de App store.
2. Zoek rechtsboven in de App store naar "Remote Desktop".

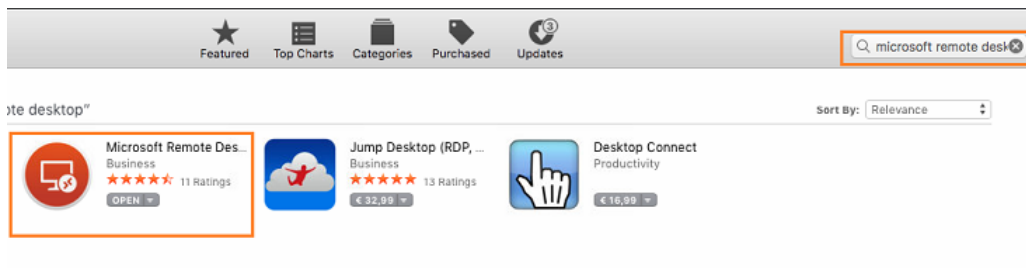


3. Installeer de app.
Als de installatie voltooid is, is het icoon "Microsoft Remote Desktop" toegevoegd aan de "Launchpad" en "Applications" map.
4. Open de "Microsoft Remote Desktop" app;




het scherm "Microsoft Remote Desktop" wordt geopend.


5. Klik op het plusje en op "Remote Resources".

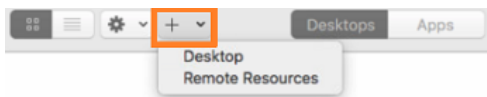

6. Typ de URL <https://members.intramedonline.nl> in.

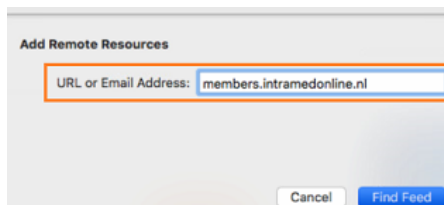


7. Klik op "Find Workspace".
8. Klik bij "User Account:" op de pijlknop achter het veld en kies voor "Add user account".

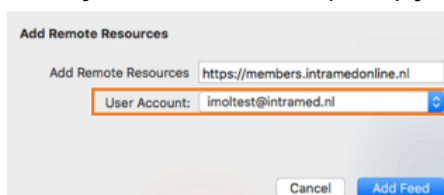

9. Typ je gebruikersnaam van Intramed OnLine in. Bijvoorbeeld jjansen@intramed.nl.
10. Klik op "Add Workspace".

11. Typ je wachtwoord in en klik op "Save".

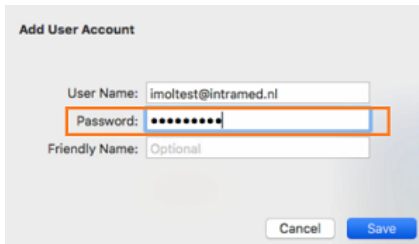

12. Vervolgens worden de beschikbare apps getoond. Klik op het icoon van Intramed.



13. Kies de administratie waarin je wil werken en vul de bijbehorende gebruikersnaam en het wachtwoord in.
Als je een nieuwe administratie opent, log je in met gebruikersnaam "super", en laat je het veld "Wachtwoord:" leeg.

